

Mic Introducer Kit (MIK)

När man sätter in en gastrostomitub med MIK fäster man 3-4 st suturer (se bild nedan). Vrid inte suturlåsen/knapparna. Dessa suturer/knappar ska lossna av sig själv eller tas bort.

Kontakta din sjuksköterska för hjälp med att avlägsna suturerna eller om dina suturknappar lossnar inom 2 veckor.

OBS! Suturlåsen/knapparna kan utgöra kvävningrisk för små barn, förhindra att små barn sväljer dem.

Vid rodnad eller andra besvär kring suturerna, kontakta din sjuksköterska.

Första bytet av gastrostomituben bör ske tidigast efter 2 månader. Om byte måste ske tidigare ska detta göras på specialistklinik.



Under de 7-10 första dagarna är det rekommenderat att tvätta med desinfektionsmedel och att täcka över gastrostomi/MIK-området vid dusch och tvätt. Området ska hållas så rent och torrt som möjligt, kontakta din sjuksköterska om du är osäker. Efter 10-14 dagar kan och bör man tvätta och torka rent dagligen.

Användning, tillförsel och måltid med gastrostomitub

- Var noga med hygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfaringsätt.
- Före måltid, kontrollera att magen känns mjuk och att centimetergraderingen på gastrostomituben är den samma som vid insättandet eller efter reglering.
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom gastrostomituben med 10-20 ml vatten.
- Läkemedel ges alltid i flytande form.
- För att undvika illamående vid måltid rekommenderas att sitta/halvsitta (minst 30°), fortsatt gärna med detta en stund efter måltid. Se till att väskan/maten är ljummen/rumstempererad.
- Vid obehag eller smärta i samband med tillförsel/måltid, kontakta din sjuksköterska eller doktor.

Om din gastrostomitub åker ut

- Ta en ny och sätt in denna så snart som möjligt. Om du inte har en ny gastrostomitub, ta den gamla, tvätta den, stoppa in och fäst med sårtejp eller liknande. Det är mycket viktigt att hålla gastrostomat öppet. Kontakta snarast sjuksköterska/doktor för att få en ny.
- Om gastrostomituben åker ut inom den första månaden efter insättandet med MIK bör specialistklinik kontaktas omgående.

Skötsel

- Tvätta och torka runt gastrostomin som en del av den dagliga hygien. Inget förband behövs.
- Roter gastrostomituben och reglera vid behov läget på stopplattan i samband med daglig tvätt (gäller ej de två första veckorna efter MIK-insättning).
- Tvätta rent och håll porten för mat mm ren efter måltid/tillförsel
- Det går bra att duscha, bada badkar, bassäng m.m. med gastrostomituben.
- Om gastrostomituben inte används, spola igenom dagligen med vatten.
- Kontrollera och fyll eventuellt på ballongen/kuffen med vatten en gång i veckan, exempelvis varje måndag. Första gången två till tre veckor efter insättandet med MIK.
- Gastrostomituben kan bytas i hemmiljö och bör bytas cirka varannan månad, då kommer den att vara missfärgad. Om byte måste ske inom fyra veckor efter insättandet med MIK ska detta göras på specialistklinik.

Almänna råd

Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun. Kan man äta via munnen så är det viktigt att fortsätta med det. Rodnad, vätskande, öm hud runt gastrostomin kan bero på läckage, tvätta rent med vatten och lufttorka flera gånger per dag.

Du har fått en Mic Bolus/Mic G, insatt med hjälp av Mic Introducer Kit

Mic Introducer Kit är ett modernt sätt att anlägga en gastrostomi. Fördelen är att en ballongfixerad gastrostomitub som Mic-Bolus och Mic G kan anläggas direkt.

I din gastrostomi har du fått en gastrostomitub av storlek fr.



Vid insättning är stomikanalen cm lång.

Ballongen är kuffad med ml.

Telefonnummer vid beställning

Kontaktperson Tel. nr:

1. Port för mat, läkemedel och vatten
2. Ballongkanal
3. Stopp-platta
4. Kuff/ballong
5. Extra port för mat, läkemedel och vatten

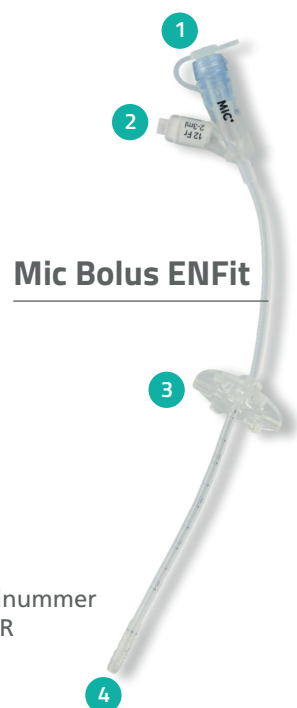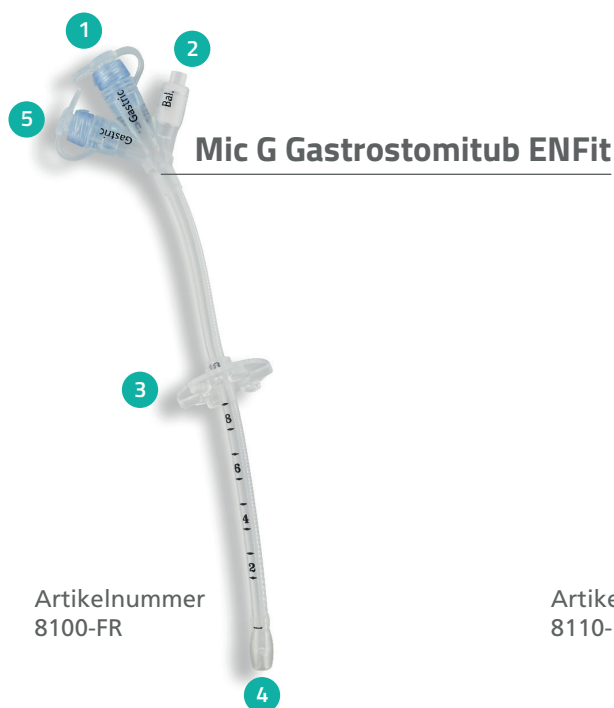

1512-017-nov-2018

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken.

Gastrostomi = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida www.gastrostomi.se